

CATÁLOGO

LOCATOR LIFE®

PRÓTESIS & IMPLANTES



Ancladen

WHERE PASSION MEETS PRECISION



**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

2025



MUCHO QUE CONTARTE

Ancladen lleva 30 años en el sector odontológico, siendo un referente en calidad y cercanía.

Con soluciones para todas las especialidades odontológicas, se focaliza en prótesis e implantes Zest Dental® así como en una gama única de instrumental para cirugía oral, regeneración ósea y tisular & odontología restauradora y conservadora.

Es el distribuidor oficial y experto en marcas mundialmente conocidas como LOCATOR®, Zest Dental Solutions, instrumental de alta calidad y precisión Stoma® o Premier®, entre otros.

Así como de una completa y puntera gama de biomateriales únicos para regeneración.

La solidez de la marca Ancladen y su experiencia en el mercado permiten ofrecer también una seleccionada gama propia de suturas quirúrgicas, fresas y consumible.

Al ser el partner de LOCATOR® en España y el artífice de su introducción en el mercado desde sus orígenes, posee la más amplia experiencia en el Implant Attachment System y el Mini Implante para crestas estrechas único en el mercado (desde Ø 2,4mm), lo que hace de Ancladen referente fundamental en el campo de la prótesis e implantología. Las soluciones que ofrece son también esenciales en el ámbito de la gerodontología, sector en gran crecimiento, así como en todo tratamiento que requiera de estos productos.

En cirugía oral es especialista en material de alta calidad y durabilidad para técnicas punteras y avanzadas en regeneración ósea y periodoncia. Así como para tratamientos más sencillos.

Ancladen es también experto en suturas. Previo al inicio del proyecto odontológico, la empresa ya operaba en el campo de la sutura hospitalaria, decidiendo desarrollar un selecto y adecuado portfolio de sutura para odontología que fue pionero en España. Con los años ha adquirido un extenso conocimiento y especialización ampliando la línea de sutura propia.

Comprometidos con la formación continua y la generación de evidencia científica, te invitamos a formar parte de nuestro programa formativo.

HAZ TU PEDIDO

Envío 24/48h

www.ancladen.com
ancladen@ancladen.com

93 417 29 84 | 91 787 07 09

 623 303 050





LOCATOR®

Solicita la certificación
oficial LOCATOR®
para tu centro

+15 MIL CLIENTES
HAN CONFIADO EN
NOSOTROS A LO
LARGO DE 30 AÑOS

TE ESPERAMOS

Ancladen

WHERE PASSION MEETS PRECISION



Únete a nuestro programa formativo
Más información en:

www.ancladenacademy.com




Índice

1. Locator Attachment System®
2. Locator Bar Attachment®
3. Locator Root Attachment®
4. Locator Overdenture Implant System®
5. Locator Fixed™
6. Locator R-Tx™
7. Accesorios imprescindibles Chairside™
8. Locator® Scan Bodies

Páginas


Locator Attachment System ®	9
Locator Attachment ®	11
Locator Bar Attachment ®	20
Locator Root Attachment ®	22
Locator Overdenture Implant System ®	23
Locator Fixed™	25
Locator R-Tx™	27
Accesorios imprescindibles Chairside™	29
Locator® Scan Bodies	32



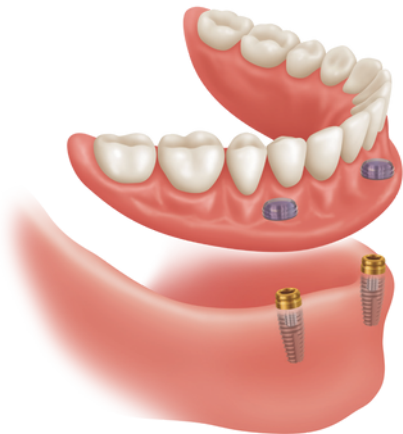


ATTACHMENT

El LOCATOR® de Zest Dental es el principal sistema para sobredentaduras retenidas sobre implantes. El Abutment se atornilla directamente sobre el implante. La cápsula que se resina en la prótesis, contiene las retenciones de Nylon.

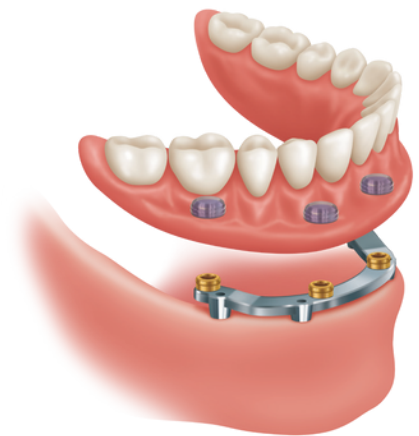

BAR ATTACHMENT

En los casos de anclajes sobre barras el LOCATOR® permite disponer de un sistema resiliente, de larga duración y bajo perfil. Locator Bar ofrece tres opciones: roscado, soldadura láser o sobrecolado.

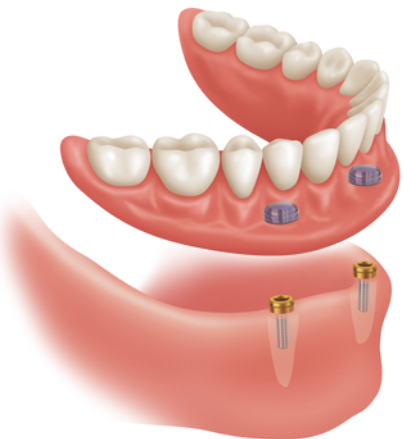


ROOT ATTACHMENT

El LOCATOR® para raíces naturales es un anclaje supra-radicular. Después del tallado y endodonciado del diente, se prepara el conducto radicular con las fresas del Kit inicial. El procesamiento es idéntico al sistema sobre implantes.

LOCATOR FIXED®

La nueva opción FIJA que se añade a las tradicionales soluciones removibles LOCATOR®. Con los Nuevos Capuchones de Procesado y los nuevos Insertos puede cambiar la Prótesis Removible a Fija. Zest propone con el LOCATOR FIXED® una solución asequible alternativa a soluciones más costosas. Fija, simple en su concepto y fácil en su realización. LOCATOR FIXED® es fija para el paciente y removible para el profesional.

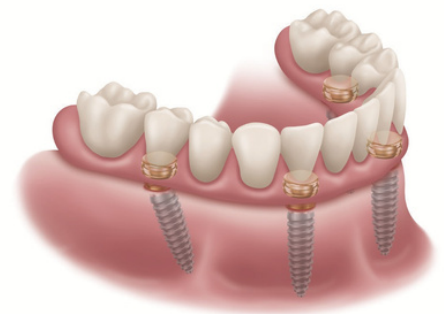

EL SISTEMA DE ANCLAJES STANDARD “GOLD”

UNA SOLUCIÓN RESTAURADORA EN LA QUE LA INDUSTRIA, LA COMUNIDAD MÉDICA Y LOS PACIENTES HAN DEPOSITADO SU CONFIANZA.

Durante 40 años, Zest Dental Solutions —Zest Anchors—, ha sido líder mundial en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución de soluciones dentales para pacientes edéntulos.

En la actualidad, el producto estrella de Zest, LOCATOR®, está ampliamente reconocido en el Sector como la solución para prótesis removibles implanto o muco-soportadas.

LOCATOR® es compatible con la mayoría de implantes dentales.

Su diseño exclusivo de bajo perfil, la tecnología pivotante, durabilidad y facilidad de uso, lo han convertido en la opción preferida por los profesionales de todo el mundo.

Millones de pacientes en el mundo disfrutan de una mejor calidad de vida, al confiar a su dentista la rehabilitación protésica con LOCATOR®. Está claro que LOCATOR® es la opción preferida para prótesis implanto o muco-soportadas.


LOCATOR INSERTOS STANDARD Y DE RANGO AMPLIADO

EL SECRETO ESTÁ EN EL PIVOTE, QUE PROPORCIONA UNA CONEXIÓN RESILIENTE QUE EVITA DAÑOS EN LOS INSERTOS RETENTIVOS AL COLOCAR LA PRÓTESIS.



INSERTOS STANDARD

Retención dual para una máxima estabilidad y acción pivotante que se adapta hasta una divergencia de 20° entre dos implantes.

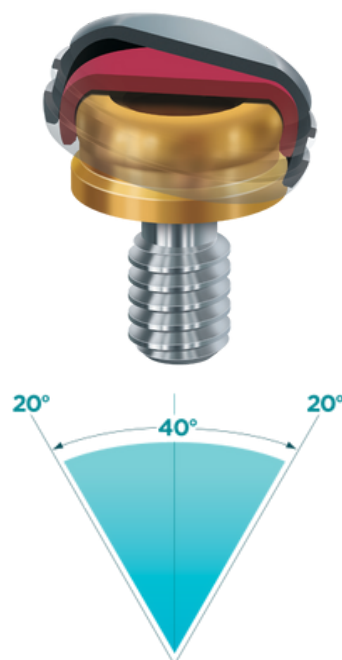


INSERTOS DE RANGO AMPLIADO

Acción pivotante que admite hasta 40° de divergencia entre dos implantes.

LOCATOR® Attachment

Anclaje supragingival de eje resiliente para sobredentaduras

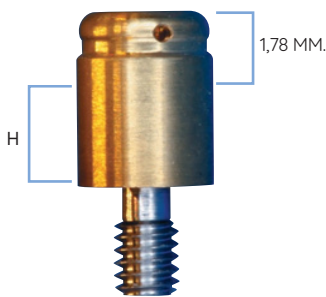


Selecione el **Locator Implant** adecuado midiendo la altura de encía —H— por encima del implante.


Referencia	Descripción	Precio
Consultar listado	Disponible para la mayoría de implantes, con alturas de hasta 6 mm.	97,00 €

Elementos retentivos de la prótesis

Distintos grados de retención. Posibilidad de elección de la fuerza más adecuada

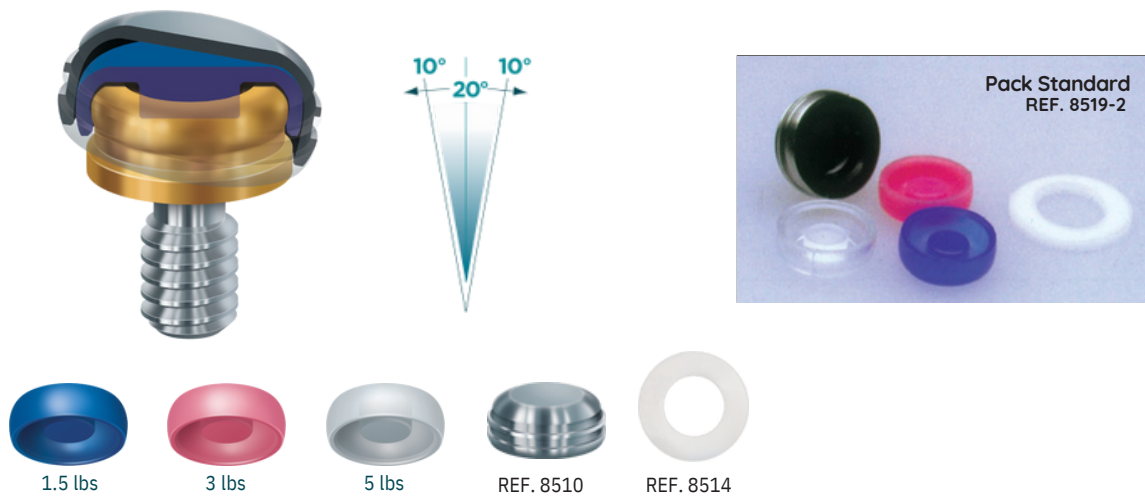

Referencia	Descripción	Precio
8519-2	LOCATOR Pack para procesado: Cápsula (Negro). Insertos: Azul-Rosa-Blanco. Aro espaciador (2 Pack)	57,00 €

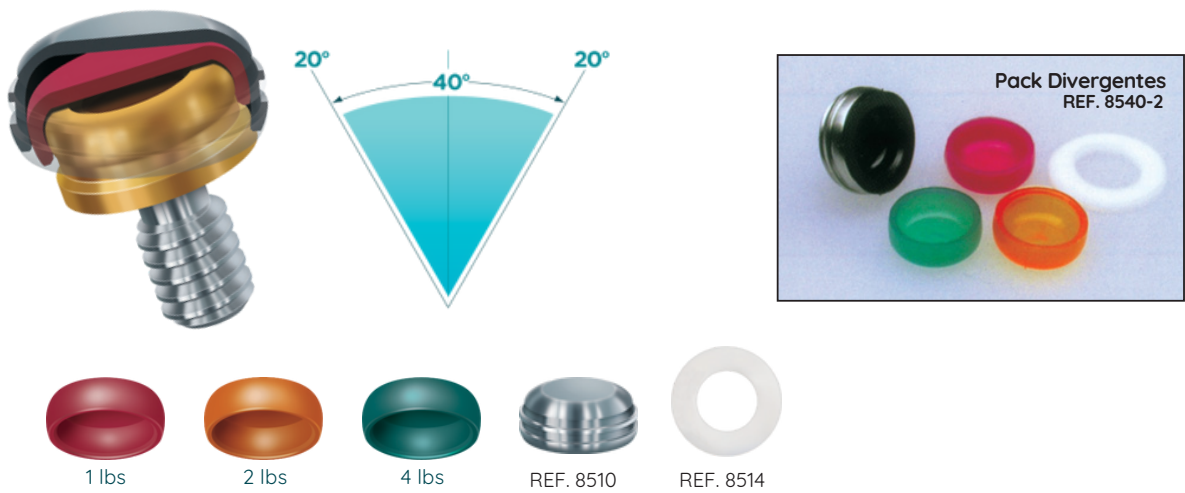

Referencia	Descripción	Precio
8540-2	LOCATOR Pack para procesado divergentes: Cápsula (Negro). Insertos: Rojo-Naranja-Verde. Aro espaciador (2 Pack)	57,00 €

 Consultar Accesorios Locator en página 13

LOCATOR® Attachment

Anclaje supragingival de eje resiliente para sobredentaduras

¡NUEVO! Core - tool



Se puede utilizar tanto con
los insertos LOCATOR®
Removibles como con
LOCATOR FIXED®

Punta de
Inserción

Recoge sin esfuerzo los insertos para transferirlos y colocarlos en el alojamiento.



Punta de
Extracción

- Coloque la punta con las puntas cerradas en el inserto.
- Gire la pinza para abrir las puntas.
- Incline la herramienta de núcleo y extraiga fácilmente cualquier inserto LOCATOR®.

Referencia	Producto	Descripción	Precio
8340		Locator Fixed - Core Tool	195,00 €
8348		Punta de Extracción	69,99€

Core Tool



EXTRACTOR



INSERTADOR



ROSCADOR

1 Desactive el Core Tool, girando la parte intermedia, como indica la figura.



2 Con el Core Tool desactivado, retire la retención a cambiar y expúlsela activando, girando hacia la derecha.



3 Con la parte intermedia (insertador) del Core Tool, posicione la nueva retención con una ligera presión hasta oír un "click".



El roscador con el soporte de fijación sirve para atornillar el Abutment en el implante.

8390	Roscador	42,00 €
8394	Soporte plástico de fijación (4 Pack)	25,00 €

Referencia	Producto	Descripción	Precio
8393		LOCATOR® Core Tool: Extractor-Insertador-Roscador	88,00 €
8397		LOCATOR® Core Tool: Extractor	42,00 €

LOCATOR® Attachment

Accesorios

INSERTOS STANDARD

Retención dual, acción pivotante y máxima estabilidad. Hasta 20° de divergencia entre implantes.



Retención BAJA - Azul Retención MEDIA - Rosa Retención ALTA - Blanca




INSERTOS RANGO AMPLIADO

Acción pivotante y divergencia de hasta 40° entre implantes.



Retención CERO - Gris Retención BAJA - Roja Retención MEDIA - Naranja Retención ALTA - Verde

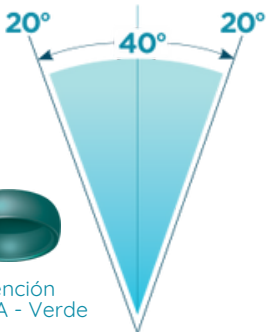

Referencia	Producto	Descripción	Precio
8510		LOCATOR® Capuchón de Procesado (4 Pack)	59,00 €
8529		LOCATOR® Inserto de Retención BAJA - Azul (4 Pack)	36,00 €
8527		LOCATOR® Inserto de Retención MEDIA - Rosa (4 Pack)	36,00 €
8524		LOCATOR® Inserto de Retención ALTA - Blanca (4 Pack)	36,00 €
8548		LOCATOR® Inserto de Retención BAJA divergente - Roja (4 Pack)	36,00 €
8915		LOCATOR® Inserto de Retención MEDIA divergente - Naranja (4 Pack)	36,00 €
8547		LOCATOR® Inserto de Retención ALTA divergente - Verde (4 Pack)	36,00 €
8558		LOCATOR® Inserto sin Retención - Gris (4 Pack)	36,00 €
9530		Medidor de Angulación	23,00 €
8517		Poste Paralelizador (4 Pack)	23,00 €
8505		Transfer de Impresión (4 Pack)	76,00 €
8530		Análogo Hembra 4mm (4 Pack)	76,00 €
8515		Inserto Negro (4 Pack)	36,00 €
8514		Aro Espaciador (20 Pack)	23,00 €
8569		Espaciador de Procesado (4 Pack)	36,00 €
8913		LOCATOR® Insertador para contraángulo.	50,00 €
8926		LOCATOR® Insertador para Llave de Paso Cuadrado 4mm	50,00 €
7362		Llave Dinamométrica de Paso Cuadrado de 4mm con indicación de Torque	383,00 €
7463		Adaptador para Llave Dinamométrica	97,00 €

LOCATOR® Attachment


Listado de referencias



LOS ABUTMENTS LOCATOR SON ESPECÍFICOS PARA CADA IMPLANTE:
PARA REALIZAR EL PEDIDO NECESITARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. Nombre de sistema de implante.
2. Diámetro.
3. Tipo de conexión y plataforma.
4. Altura de encía.

SELECCIÓN DE LA ALTURA NOMINAL ADECUADA DEL ABUTMENT DEL LOCATOR®

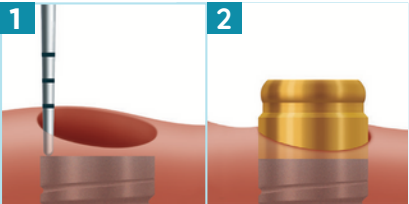

Con la ayuda de una sonda periodontal, mida la altura de encía en el punto más alto y seleccione el Abutment LOCATOR® correspondiente a la altura medida. Así, si la altura medida es, por ejemplo, de 3 mm, pida el LOCATOR de 3 mm. En todos los casos, el Abutment tiene 2 mm más de altura para acomodar la cápsula que contiene las retenciones.

DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE

LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM

CUFF HEIGHT

0.0mm 0.73mm 1.0mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm

ADIN

Touareg Closefit RP 3.5			2069	2070	2071	2072	2073	2074
Touareg S Touareg	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
Closefit WP 4.3/5			2075	2076	2077	2078	2079	2080

ANTHOGRYR

3.4 AXIOM BL				1697	1698 (3.5)	1699 (4.5)		
AXIOM TL / Plataforma N		2811 (0.5)	2812 (1.5)	2813 (2.5)	2814 (3.5)	2815 (4.5)		
AXIOM TL / Plataforma R		2830 (0.5)	2831 (2.5)	2832 (2.5)	2833 (3.5)	2834 (4.5)		

AVINENT

HI 3.5,4.1	2025		2026	2027	2028	2029	2030	
Avinent EC 3.3/3.5			1916	1917 (2.5)	1918 (3.5)	1919 (4.5)	1920 (5.5)	1921 (6.5)
Avinent EC 4.1		8681		8682	8683	8684	8685	8696
Avinent EC 5.0			8825 (1.1)	8826	8827	8828	8829	8830
Avinent IC 3.5/3.8/4.2	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
Avinent IC 4.5/4.7/5.0	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8627
Avinent CC 3.5/4.0			2069	2070	2071	2072	2073	2074
Avinent CC 4.1			2075	2076	2077	2078	2079	2080

BICON

Bicon 3.0			8930	8931	8932	8933	8934	
-----------	--	--	------	------	------	------	------	--

BIOHORIZONS (Compatible con Tapered Plus, Tapered Internal Implant, Tapered Tissue Level, Single Stage & Internal Parallel Wall Implants)

INTERNAL CONNECTION

3.0mm Diameter Platform			1927	1928	1929	1930	1931	1932
3.5mm Diameter Platform	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
4.5mm Diameter Platform	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8628

* Consúltenos para otras Referencias que no aparecen en el listado.

LOCATOR® Attachment

Listado de referencias

DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE	LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM							
	CUFF HEIGHT							
	0.0mm	0.73mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
BIOMET 3i (Compatible con 3i T3 , NanoTite™ & OSSEOTITE Implants) NOTE: BIOMET 3i Abutments feature a .048 hex drive)								
CERTAIN INTERNAL CONNECTION								
3.4mm Certain MICROMINIPLANT			8431	8432	8433	8434	8435	8436
4.1mm Diameter Certain Platform		8630		8631	8632	8633	8634	8635
EXTERNAL HEX CONNECTION								
3.4mm External Hex MICROMINPLANT			8441	8442	8443	8444	8445	8446
4.1mm External Hex		8681		8682	8683	8684	8685	8696
5.0 EXTERNAL HEX		8820		8821	8822	8823	8824	
BIONER								
DM 3.5/4.0/5.0			2069	2070	2071	2072	2073	2074
HIKELT	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
IKELT/BIKELT		8681		8682	8683	8684	8685	8685
BTI								
EXTERNAL								
4.1			8681	8682	8683	8684	8685	8696
INTERNAL								
3.5 INTERNA NR			2985	2986	2987	2988	2989	2990
4.1 INTERNA			8291	8292	8293	8294		
DENTSPLY								
ANKYLOS CONICAL CONNECTION (Compatible con Ankylos C/X Implants)								
Ankylos Implant				1729	1730	1731	1732	1733
ASTRA TECH EV CONNECTION (Compatible con Astra Tech EV Implants)								
3.6mm Diameter Implant			2790	2791	2792	2793	2794	
4.2mm Diameter Implant			2795	2796	2797	2798	2799	
ASTRA TECH TX CONNECTION (Compatible con Astra Tech TX Implants)								
3.0			2212	2213	2214	2215	2216	2217
Astra TX (Aqua)			8115	8116	8117	8118	8119	
Astra TX (Lilac)		8686 (0.5)		8687	8688	8689	8690	
FRIALIT - 2								
3.4mm FRIALIT -2			8805	8806	8807	8808	8809	
3.8mm FRIALIT -2			8810	8811	8812	8813	8814	
4.5mm FRIALIT -2			8815	8816	8817	8818	8819	
5.5mm FRIALIT -2			8139 (1.3)	8140	8141	8142	8143	
ECKERMANN								
All Spiral 4.5			8261	8262				
Winner	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)

* Consúltenos para otras Referencias que no aparecen en el listado.

LOCATOR® Attachment

Listado de referencias

DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE	LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM							
	CUFF HEIGHT							
	0.0mm	0.73mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
EUROTEKNIKA (ETK)								
AESTHETICA			8621 (1.5)	8622 (2.25)	8623 (3.25)	8624 (4.25)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
UNEVA HE		8681		8682	8683	8684	8685	
Naturall 4.5/5			8686	8687	8688	8689	8690	
Naturactis 3.5/4			8115	8116	8117	8118	8119	
GALIMPLANT								
IPX			8115	8116	8117	8118	8119	
GMI								
Phoenix RP		8681		8682	8683	8684	8685	8696
Frontier	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8625 (6.5)
Avantgard RP			8810	8811	8812	8813	8814	
KEYSTONE/LIFECORE BIOMEDICAL								
RESTORE 3.3 and 3.4 (SD) (HEX)			8196	8197	8198	8199	8200	
RESTORE 3.75 and 4.0 (RD) (HEX)		8681		8682	8683	8684	8685	8696
Legacy 3.0			2308 (0.75)	2309	2310	2311	2312	2313
Legacy 3.7	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8625 (6.5)
Legacy 4.7	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8628
KLOCKNER								
Vega NV				2225	2226	2227	2228	2229
Vega RV				2231	2232	2233	2234	2235
Essential			8040	8041	8042	8043	8044	8045
KL RP		8681		8682	8683	8684	8685	8696
BIOTECH								
Kontakt			1113	1116	1114	1117	1115	1118
BIS/BIS Conic 3.9/4.4		8630		8631	8632	8633	8634	8635
MEGAGEN								
AnyRidge Int 3.5			2100	2101	2102	2103	2104	2105
MICRODENT								
EKTOS	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8625 (6.5)
UNIVERSAL 3.5/4.1		8681		8682	8683	8684	8685	8696

* Consúltenos para otras Referencias que no aparecen en el listado.

LOCATOR® Attachment

Listado de referencias

DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE	LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM							
	CUFF HEIGHT							
	0.0mm	0.73mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
MIS MEDICAL								
MIS MEDICAL IMPLANT SYSTEM								
Internal (SP) Implant 3.75 y 4.2	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
Internal (WP) Implant 5.0	8671		8672	8672	8674	8675	8627	8628
External (SP) (HEX) Implant		8681		8682	8683	8684	8685	8696
C1 Conical NP			2143	2144	2145	2146	2147	2148
C1 Conical RP			2149	2150	2151	2152	2153	2154
Seven Internal 3.3	2062 (0.1)		2063	2064	2065	2066	2067	2068
MOZO GRAU/ TICARE								
OSSEOUS RP (H.E)		8681		8682	8683	8684	8685	8696
InHex RP			8115	8116	8117	8118	8119	
ITN HEX WP		8686 (0.5)		8687	8688	8689	8690	
NEODENT								
CM Grand				2168	2169	2170	2171	2172
Morse			2112	2113	2114	2115	2116	2117
NOBEL BIO CARE								
CONICAL CONNECTION (Compatible con NobelActive®, NobelParallel™ & NobelReplace® Implants)								
Narrow Platform (NP)			2069	2070	2071	2072	2073	2074
Regular Platform (RP)			2075	2076	2077	2078	2079	2080
EXTERNAL CONNECTION (Compatible con Brånemark and NobelSpeedy® Groovy Implants)								
Narrow Platform (NP)		8105		8106	8107	8108	8109	
Regular Platform (RP)		8681		8682	8683	8684	8685	8696
Wide Platform (WP)			8825 (1.1)	8826	8827	8828	8829	
TRI-CHANNEL CONNECTION (Compatible con NobelReplace, ReplaceSelect™, NobelSpeedy® Implants)								
Narrow Platform (NP)	8756		8757	8758	8759	8760	8734	8735
Regular Platform (RP)	8761		8762	8763	8764	8765	8753	8754
PHIBO - IMPLADENT								
TSAS3			1755	1756	1757	1758	1759	1760
TSAS4			1761 (1.4)	1762	1763	1764	1765	1766
TSH-BNT S2			1916	1917	1918	1919	1920	1921

* Consúltenos para otras Referencias que no aparecen en el listado.

LOCATOR® Attachment

Listado de referencias

DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE	LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM							
	CUFF HEIGHT							
	0.0mm	0.73mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	6.0mm
STRAUMANN								
TISSUE LEVEL CONNECTION								
RN			8742	8743	8744	8745	8751	8752
BONE LEVEL CONNECTION								
NC				8422	8423	8424	8425	8426
RC			8170	8171	8172	8173	8174	8175
BLX / BLC			2326	2327	2328	2329	2330	2331
TLX NT / TLC NT			2350	2351	2352	2353	2354	2355
TLX RT / TLC RT			2356	2357	2358	2359	2360	2361
ZIACOM								
ZM4/ZM8/ OEX		8681			8423	8424	8425	8426
Zinic	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
Galaxy NP			8115	8116	8117	8118	8119	
GALAXY RP		8686 (0.5)		8687	8688	8689	8690	
SYBRON								
Pitt Easy 3.8			8321	8322	8323	8324	8325	8326
ZIMMER (Compatible con Tapered Screw-Vent®, Screw-Vent®, Trabecular Metal™ Implants & AdVent 5.7mm Platform)								
Eztetic 2.9 / 3.1			2218	2219	2220	2221	2222	2223
INTERNAL CONNECTION								
3.5mm Diameter Platform	8661		8662	8663 (2.5)	8664 (3.5)	8665 (4.5)	8625 (5.5)	8626 (6.5)
4.5mm Diameter Platform	8671		8672	8673	8674	8675	8627	8628
PARAGON								
SWISSPLUS 3.8		8935 (0.75)		8936	8937	8938		
SWISSPLUS 4.8			8939 (1.29)	8940	8941	8942		
CALCITEK								
INTEGRAL 4.0	8651		8652	8653	8654	8655		

* Consúltenos para otras Referencias que no aparecen en el listado.

LOCATOR® ATTACHMENT SYSTEM - Manual Técnico

Siga el Procedimiento de colocación del Abutment y el Procesado de las Cápsulas, -Técnicas directa o indirecta-, consultando el Manual Técnico del Sistema Locator®.



LOCATOR®
ATTACHMENT SYSTEM
MANUAL TÉCNICO

LOCATOR® Attachment


Locator sobre aditamentos Multi - Unit




Referencia	Descripción	Precio
8909-2	LOCATOR® sobre aditamentos Multi-Unit (2 Pack). Abutment y cuello metálico.	214,00 €

LOCATOR® MULTI-UNIT ABUTMENTS

El LOCATOR® sobre aditamentos Multi-Unit consta de dos elementos: un Collar de Titanio y un Abutment LOCATOR. El uso combinado de ambos elementos sobre Aditamentos Multi-Unit rectos o angulados, está diseñado para aplicaciones de Sistema LOCATOR® independientes.

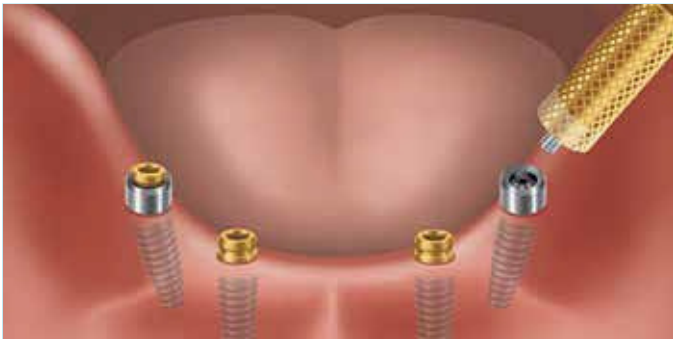

1 Una vez atornillado el aditamento Multi-Unit adecuado (recto o angulado y de la altura indicada), coloque el Collar de Titanio sobre él.

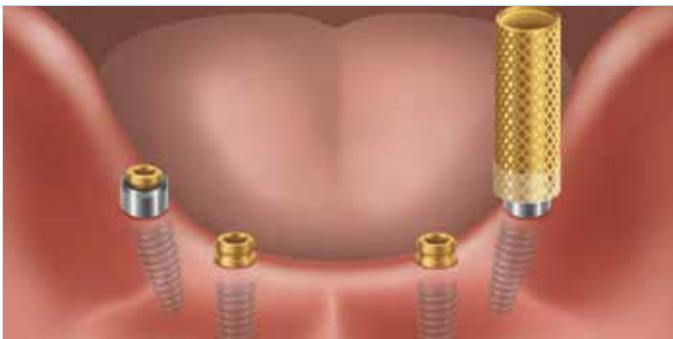

2 Apretar a mano el Abutment LOCATOR® y dar un torque de 20 Ncm, utilizando la llave dinamométrica para evitar que se aflojen los tornillos.




3 Un torque superior a los 20 Ncm recomendado, puede causar la fractura del Locator MultiUnit Abutment.

Proceder a continuación siguiendo el procedimiento del Sistema de Anclajes LOCATOR®.

LOCATOR® BAR Attachment

Drill and Tap

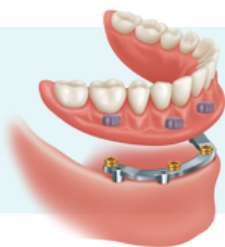

BAR ATTACHMENT

En los casos de anclajes sobre barras, el LOCATOR® permite disponer de un sistema resiliente, de larga duración y bajo perfil. Locator Bar ofrece tres opciones: roscado, soldadura láser o sobrecolado a la barra.

Drill & Tap

Locator® atornillado a la barra

El Locator atornillado a la barra permite disponer de un sistema resiliente, de larga duración, bajo perfil y puede ser retirado fácilmente.



Hembra para atornillar.



Pack Bar
REF. 8028-2

Referencia	Descripción	Precio
8589-2	LOCATOR Bar: Female 2.0mm Roscado (2 Pack)	99,00 €
8014	Calcinable para rosca 2.0mm (10 Pack)	61,00 €
9102	Bar Dril 2.0	17,00 €
9104	Bar Tap 2.0	26,00 €
9107	Paralelizador para Locator Bar	38,00 €
8016	Holder-Soporte para Drill y Tap	55,00 €
8028-2	Pack para procesamiento de la prótesis (2 Pack) Cápsula (amarillo). Botones: Blanco-Rosa-Azul. 2 Aros espaciadores	57,00 €




REF. 9107



REF. 8016


PROCEDIMIENTO

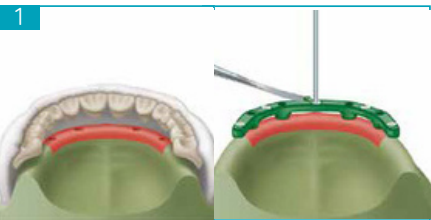

1 Colocar los calcinables para rosca en la barra patrón.




2 Colado de la barra siguiendo los procedimientos estándar. Los calcinables formarán parte de la barra.

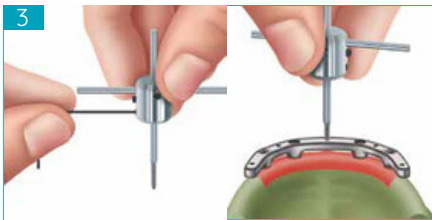

3 Desbastado y pulido de la barra. Limpieza interna de los pasos de rosca. Utilizar un aceite fluido para reducir el riesgo de fractura de los drills.



4 Atornille los Locator en la barra con la ayuda del Core Tool.

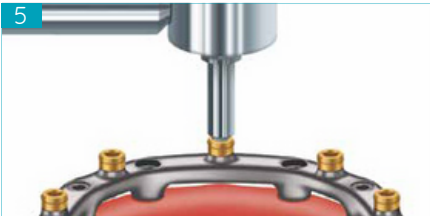

5 Torque de 30 Ncm con la llave dinamométrica.



6 Colocar los Capuchones y fabricar la prótesis.

 El procesamiento de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos, es idéntico al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Catálogos > Manual Técnico Locator Bar.pdf

LOCATOR® BAR Attachment

Cast to Bar

Cast-To Bar

Locator® sobrecolado a la barra

El Locator para barras ofrece la opción de sobrecolar la hembrilla, mediante el proceso del colado de la barra patrón.




Hembra para sobrecolocar




Pack Bar
REF. 8028-2

Referencia	Descripción	Precio
8586-2	LOCATOR Cast-To Bar: Female (2 Pack)	99,00 €
9107	Paralelizador para Locator Bar	38,00 €
8028-2	Pack para procesamiento de la prótesis (2 Pack) Cápsula (amarillo). Botones: Blanco-Rosa-Azul. 2 Aros espaciadores	57,00 €

PROCEDIMIENTO

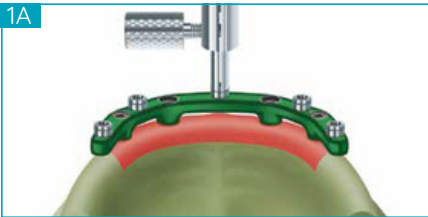

1A-1B Con la ayuda del paralelizador, posicionar los Locator® en la barra patrón.

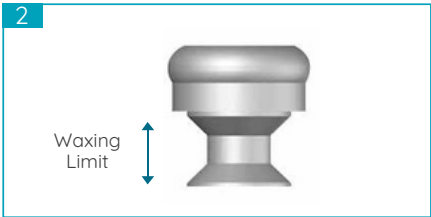

2 Hembra para sobrecolar. Encerar hasta la parte superior del receso retentivo y no por encima de la línea indicada.



3A-3B Proceso de colado, desbaste y pulido, siguiendo el procedimiento estándar.
NOTA: La temperatura de colado, no debe exceder los 2.000°F (1.100 °C). Por encima de esta temperatura, la hembra de acero inoxidable, podría sufrir deformaciones.




4 Coloque los Capuchones de procesado en cada Locator® para comprobar que no haya interferencias. Proceder a fabricar la prótesis.

El procesamiento de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos, es idéntico al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Catálogos > Manual Técnico Locator Bar.pdf

LOCATOR® ROOT Attachment

Anclaje intra-radicular de conexión para sobredentaduras

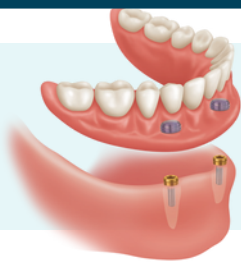

ROOT ATTACHMENT

El LOCATOR para raíces naturales es un anclaje supra-radicular. Después de tallado y endodonciado el diente, se prepara el conducto radicular con las fresas del Kit inicial. El procesado es idéntico al sistema sobre implantes.




Hembrilla


- El LOCATOR consta de dos elementos: uno metálico que se inserta en la raíz dentaria y un botón de Nylon que va colocado en la prótesis.
- Endodonciado y tallado el diente, se prepara el conducto radicular con las fresas del Kit inicial.
- Las hembras se cementan con un cemento de resina, de composite o de ionómero de vidrio.

Referencia	Descripción	Precio
8011	LOCATOR: Kit 4 raíces, con fresas	399,00 €
8010	LOCATOR: Kit REPOSICIÓN 4 raíces, sin fresas	378,00 €
8520-2	LOCATOR Root: Hembra (2 Pack)	155,00 €
8519-2	LOCATOR: Pack de Procesado (2 Pack)	57,00 €
8924	LOCATOR Root: Fresa Piloto	25,00 €
8922	LOCATOR Root: Fresa de Contorno	36,00 €


PROCEDIMIENTO

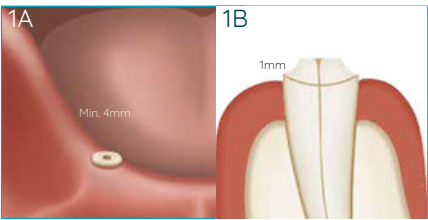


1A-1B
La superficie debe ser de un mínimo de 4 mm.

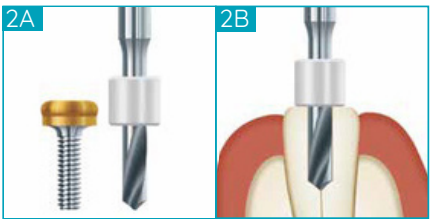

2A-2B
Fresa Piloto con tope ajustable a la longitud de la raíz.

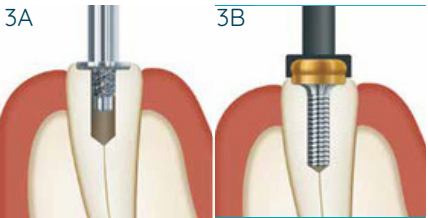

3A-3B
Fresa de contorno y colocación de la hembra con la ayuda del transportador.

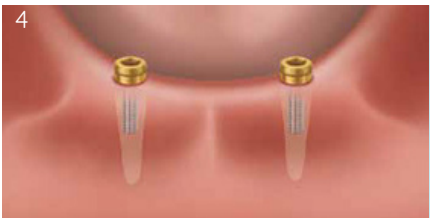


4
Utilice el cemento de su elección. Resinado de la prótesis.

 El procesado de la prótesis, así como las distintas retenciones y recambio de los machuelos, es idéntico al sistema sobre implantes.

Más información en:
www.ancladen.com > Descargas > Manual Técnico Locator Root.pdf

SISTEMA DE IMPLANTES LOCATOR

ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™

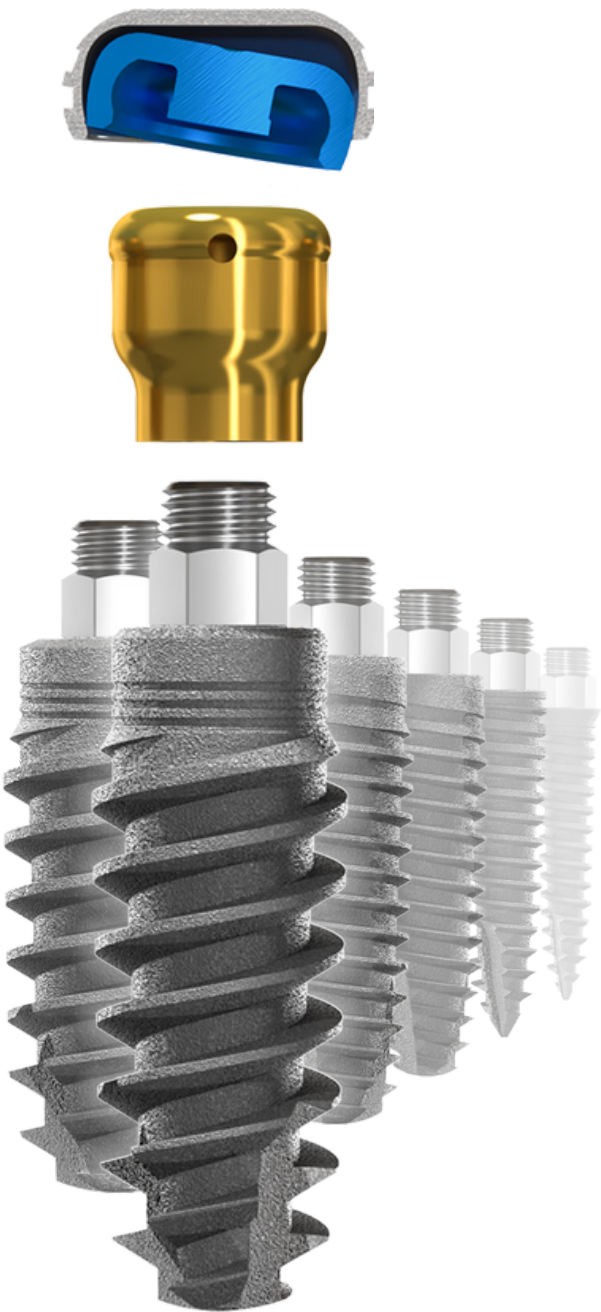

VER CATÁLOGO

LOCATOR® Implant System

Implantes Locator® - Mini implantes desde 2,4mm



**PRÁCTICO PACKAGE
TODO-EN-UNO**

- 1 Implante
- 1 LOCATOR® Abutment
- 1 Pack de Procesado


El sistema de dos elementos, con el Abutment extraíble y alturas de 2.5/3/ 4/5 y 6 mm., flexibiliza la elección según la altura del tejido, y permite el intercambio en caso de desgaste con el tiempo.



Kit Quirúrgico Fácil de identificar

Los Kits Quirúrgicos LOCATOR Implant, ofrecen un diseño simplificado, con un oportuno Protocolo de Fresado codificado por colores que facilitan su uso. Los topes para fresas son muy prácticos y fáciles de usar.

FRESAS CODIFICADAS POR COLORES

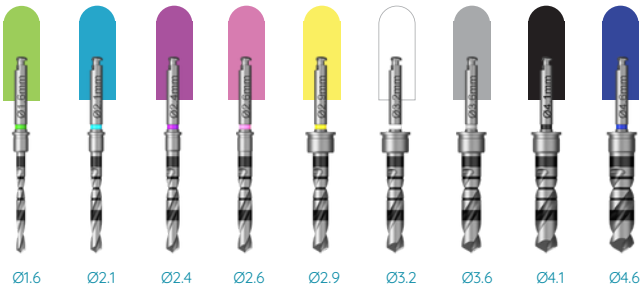

PROTOCOLO DE FRESADO

DIÁMETRO IMPLANTE	BLANDO	DURO
Ø2.4mm		
Ø2.9mm		
Ø3.5mm		
Ø3.9mm		
Ø4.4mm		
Ø4.9mm		

- Círculo entero**
Fresar la longitud total del implante
- Medio círculo**
Fresar 4mm. menos que la longitud del implante

**LAS VENTAJAS DE LOS
IMPLANTES LOCATOR**



Consulte nuestras Ofertas y planifique los casos de Removibles sobre Implantes con un Sistema Premium que combina los elementos necesarios con un coste muy razonable.

Si ya utiliza los Implantes LODI de 2.4 o 2.9, únicamente necesitará 2 o 3 fresas adicionales según los casos. Cortical drill y los Topes de fresas opcionalmente.

Consulte en su caso, las Ofertas que le permitirán recibir el nuevo Surgical Kit por una compra de Implantes LOCATOR.

Ver en YouTube:


- The Newly Expanded LOCATOR Overdenture Implant System (<https://youtu.be/iklbkmhbdBA>)
- Mandibular Guided Surgery Demonstration (<https://youtu.be/RskPsrAm5R0>)
- Basic Mandibular Overdenture Surgery and Prosthetics (<https://youtu.be/e0RrQwe5V3M>)

LOCATOR FIXED®

Locator® LIFE - Familia de soluciones



Con los nuevos Capuchones de Procesado y los nuevos Insertos puede cambiar la Prótesis Removible a Fija

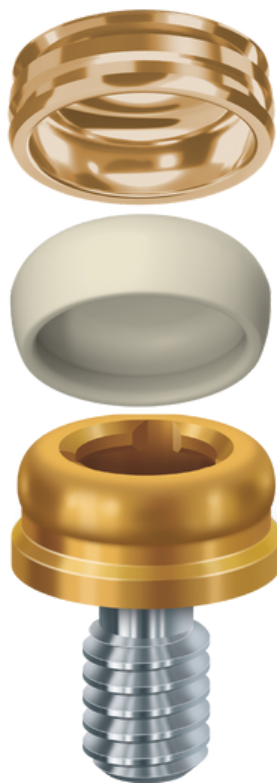

LOCATOR FIXED™ Capuchón

Diseñados para tener una mayor fuerza de retención, pero utilizando el mismo procedimiento de procesamiento que los Capuchones LOCATOR tradicionales.

Insertos específicos LOCATOR FIXED™


Insertos fijos de material rígido, diseñados para encajar con precisión en los Capuchones. Indicados para prótesis completas fijas. Admiten divergencias de hasta 40° entre implantes.

LOCATOR Abutments

Desarrolle sobre lo que ya conoce y en lo que confía en su práctica: LOCATOR Zest —Zest LOCATOR FIXED—, ofrece una solución de arcada completa utilizando los Abutments LOCATOR existentes.

Nuevo LOCATOR FIXED™

El mismo Procedimiento que con LOCATOR para Removibles

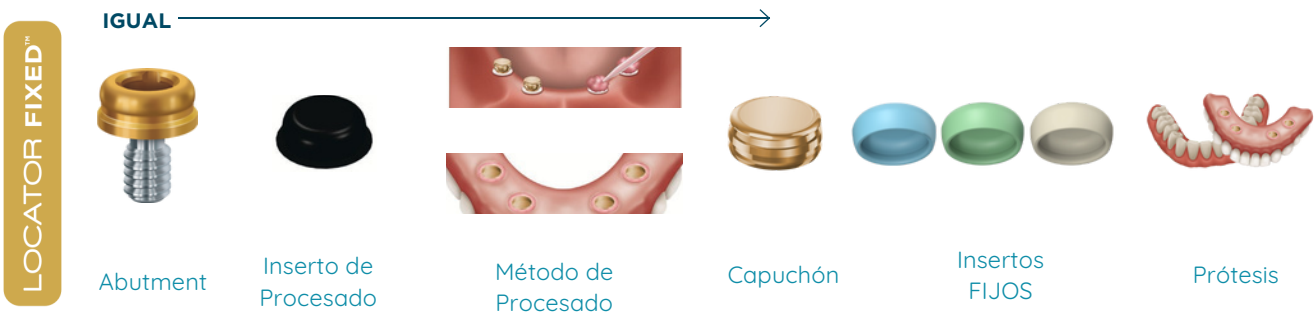

La facilidad que supone trabajar con técnicas de Procesado bien conocidas, evita tener que adquirir nuevos conocimientos. Si ya realiza Prótesis removibles, la planificación quirúrgica y protésica no ofrece dificultad adicional alguna.

LOCATOR FIXED[®]

Locator[®] LIFE - Familia de soluciones




Los LOCATOR FIXED son compatibles con todas las conexiones LOCATOR Implant, LODI y Multi Unit

Compatible con LOCATOR FIXED



LOCATOR Abutment Implantes LOCATOR Abutment LOCATOR sobre Multi-Unit

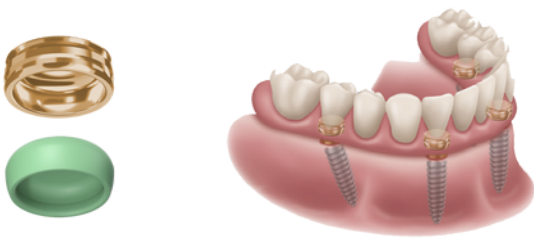

LOCATOR
FIXED[™]

Elección de los Insertos LOCATOR FIXED[™] en función del número y posición de los Implantes

LOCATOR FIXED
Capuchón
REF. 9508-4 (4ud.)

LOCATOR FIXED
Insertos 4 implantes
VERDE
REF. 9501-2 (2ud.)


LOCATOR FIXED
Insertos Anterior/Posterior
BEIGE
REF. 9506-2 (2ud.)

LOCATOR FIXED
Insertos Medio Arco
AZUL
REF. 9507-2 (2ud.)

1 Capuchón
1 Inserto VERDE
1 Aro Espaciador
REF. 9509-01

1 Capuchón
1 Inserto BEIGE
1 Aro Espaciador
REF. 9509-02

1 Capuchón
1 Inserto AZUL
1 Aro Espaciador
REF. 9509-03


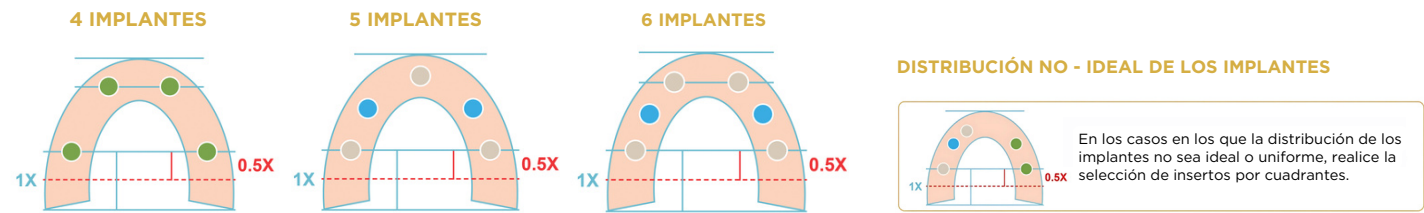


Para más de 6 Implantes: Usar Insertos Beige en las posiciones más anteriores y posteriores en cada cuadrante
 NOTA: NO reutilice los Insertos. Los Insertos deben ser reemplazados cada vez que se desmonte la Prótesis

Core Tool mejorado para
 LOCATORy LOCATOR FIXED[™]
 REF. 8340



LOCATOR FIXED[™]
 Dispositivo de Colocación y Extracción
 de prótesis
 REF. 9599

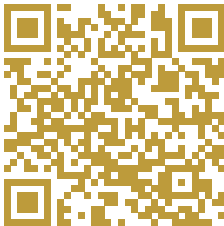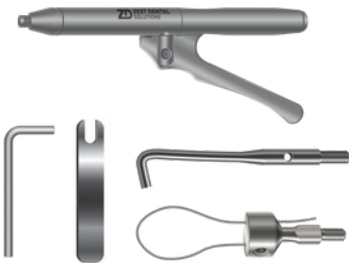

LOCATOR FIXED[™]
 ATTACHMENT SYSTEM
 MANUAL TÉCNICO

LOCATOR R-Tx[®]

Locator[®] LIFE - Familia de soluciones




Descripción del sistema

Tecnología pivotante y renovado diseño


1 TECNOLOGÍA PIVOTANTE QUE HACE MÁS FÁCIL LA COLOCACIÓN DE LA DENTADURA

Las retenciones pivotan dentro del Capuchón del Atache Dental, y permite a los pacientes asentar su Prótesis sin dañar los componentes. Las modificaciones en el Capuchón de Atache permiten ahora que las Retenciones del LOCATOR R-Tx pivoten hasta 30° para tratar un máximo de 60° de divergencia entre implantes.

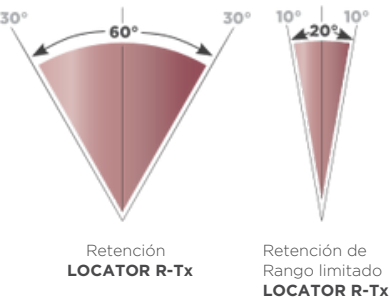

2 PRÁCTICO DISEÑO DEL CAPUCHÓN DEL ATACHE DENTAL


Surcos horizontales y planos para oponer resistencia a movimientos verticales y rotacionales. El nuevo anodizado rosa mejora la estética.

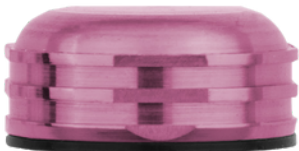

Capuchón de procesado

3 NUEVO DISEÑO DE LAS RETENCIONES

El diseño de las retenciones ofrece características de doble retención externa.

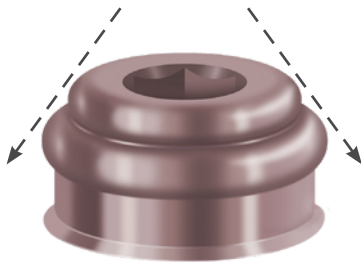


4 DISEÑO CORONAL MÁS ESTRECHO

La doble retención del Abutment con la parte superior más estrecha ofrece un efecto de cono que permite al paciente una mayor facilidad de alineamiento y la adecuada colocación de la Prótesis.

5 HERRAMIENTA PARA LAS RETENCIONES "INSERT TOOL"

Herramienta de doble función para insertar y extraer las Retenciones del LOCATOR R-Tx.

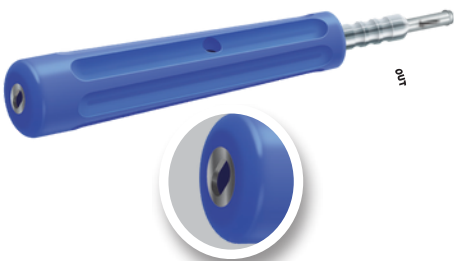

Ranura metálica

LOCATOR R-Tx[®]

Locator[®] LIFE - Familia de soluciones





Descripción del sistema

Elementos Retentivos y Packaging
“TODO-EN-UNO”

PRÁCTICO PACKAGING TODO-EN-UNO


Práctico diseño Todo-En-Uno, de doble vial confrontado que contiene el Abutment y los Componentes de Procesado, proporcionado todos los componentes para una referencia.

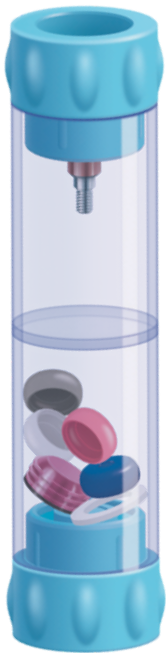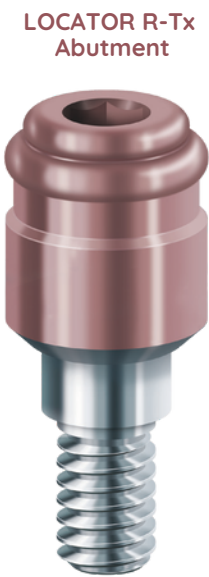

143€

INCLUYE:

- 1 - Abutment
- 1 - Capuchón de procesado
- 1 - Retención CERO (Gris)
- 1 - Retención BAJA (Azul)
- 1 - Retención MEDIA (Rosa)
- 1 - Retención ALTA (Blanco)
- 1 - Aro espaciador

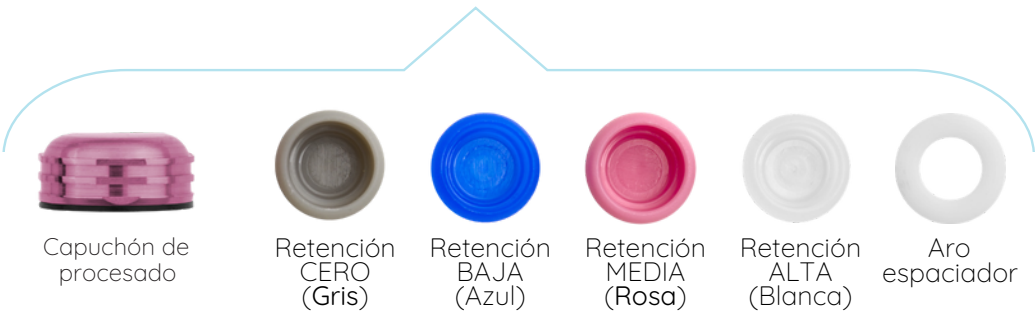

Retenciones de Rango Limitado para pacientes que requieren una mayor estabilidad:

Las nuevas Retenciones para LOCATOR R-Tx, están indicadas para pacientes con menos de 10° de divergencia entre implantes.

En estos casos, las Retenciones de Rango Limitado, proporcionan un ajuste más seguro y una mayor estabilidad de la Prótesis.



REF. 30027
36,00 €
Pack 4 ud.
Retención BAJA
Azul Claro



REF. 30028
36,00 €
Pack 4 ud.
Retención MEDIA
Morado



REF. 30029
36,00 €
Pack 4 ud.
Retención ALTA
Dorado

CONSULTAR EN EL CATÁLOGO EL
LISTADO DE REFERENCIAS
& MANUAL TÉCNICO



ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES PARA GANAR TIEMPO EN LA CONSULTA



**Regale hoy a sus pacientes la Herramienta
para sacar fácilmente la Dentadura**




REF. 09549


El Kit contiene: 10 unid.

Denture Removal Tool

55,00 €

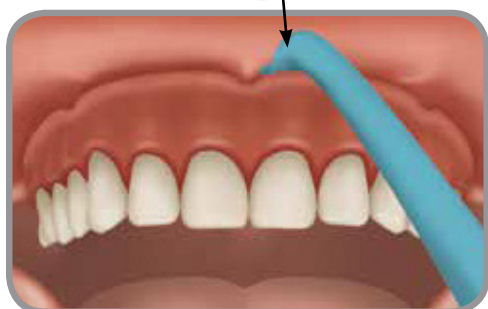

Inserte el extremo debajo de la dentadura

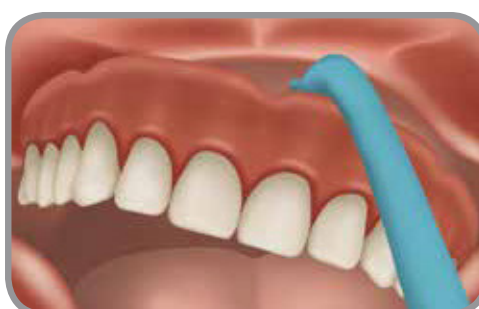

Accione el mango para desalojar la
sobredentadura

¿Tiene Vd. pacientes o cuidadores que tienen dificultades para extraer la Dentadura?

Ahora les puede ofrecer la solución con el “Chairside Denture Removal Tool”. Esta herramienta fácil de usar está diseñada para ser utilizada por el paciente o cuidador, para ayudar al desalojamiento de la Prótesis Dental, tanto dentaduras como Removibles sobre implantes.

Agradable para el paciente y fácil de usar

- Mango grande, ergonómico, fácil de agarrar, que no resbala.
- Diseño Bidireccional para pacientes con limitaciones de destreza.
- El mango angulado facilita una cómoda introducción en la zona intraoral y el cuello extendido permite al paciente alcanzar los flancos de la prótesis manteniendo la herramienta en un nivel cómodo (debajo de la barbilla).
- Punta redondeada y sin bordes afilados para evitar traumatismos en los tejidos blandos o daños en la prótesis.

ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES PARA GANAR TIEMPO EN LA CONSULTA



MATERIAL PARA EL PROCESADO DE ATACHES

Es un material dual, auto y foto curable. Fabricado a base de material Bis-acrílico, de fácil manipulación y confort para el paciente.



Chairside
REF. 9566
86,00 €

Chairside Fast
REF. 90-00130
86,00 €

Es económico y fácil de aplicar, ya que no requiere el uso de Primer. Permiten trabajar con precisión, utilizando la cantidad exacta. **CHAIRSIDE** , es muy agradable para el paciente por su ausencia de olor y sabor.

Elija el CHAIRSIDE® adecuado:
NORMAL o RÁPIDO



8g (4ml) Syringe and Plunger



REF. 9125-15
19,00 €
Tips de mezcla marrones (15)
Para usar con la jeringa de 8g.

Tiempo de trabajo	1:45	0:30
Tiempo Total	5:00	2:00
Mejor para:	NORMAL • Procedimientos estándar	RÁPIDO • Fraguado acelerado • Hasta 3 Capuchones


ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES PARA GANAR TIEMPO EN LA CONSULTA



KIT EXHAUSTIVO DISEÑADO PARA LA PREPARACIÓN Y PULIDO DE PRÓTESIS DENTALES

REF. 9582


El Kit contiene: 5 fresas y 1 pulidor diseñadas para la preparación de los alojamientos de los Ataches en las sobredentaduras.
275,00 €

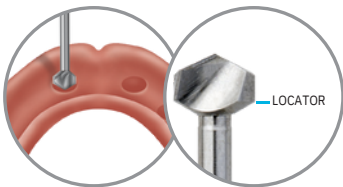


Fresa CHAIRSIDE Recess
Preparación del alojamiento específico para Locator




Fresa CHAIRSIDE Undercut
Para favorecer la retención mecánica del Atache

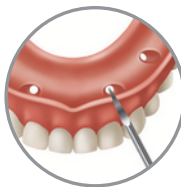

Fresa CHAIRSIDE Vent Hole
Preparación del orificio para eliminar el exceso de material

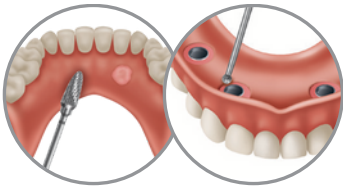

Fresas CHAIRSIDE Trim & Grind
Eliminación eficaz del sobrante, una vez solidificado

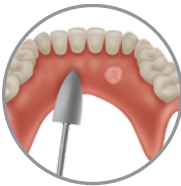

Pulidor CHAIRSIDE Polisher
Acabado y pulido de la prótesis finalizada

ESPECIFICACIONES Y TARIFA FRESAS CHAIRSIDE

Referencia	Producto	Fresas Chairside™	Velocidad recomendada (RPM)	Máxima velocidad (RPM)	Precio
9576		Recess	18.000 (alta)	30.000 (alta)	64,00 €
9577		Undercut	20.000 (alta)	50.000 (alta)	33,00 €
9578		Vent	18.000 (alta)	50.000 (alta)	33,00 €
9579		Trim	20.000 (alta)	35.000 (alta)	43,00 €
9583		Grind	20.000 (alta)	35.000 (alta)	33,00 €
9580		Polisher (Pack de 5 ud)	7.000 (alta)	12.000 (alta)	49,00 €

No se recomienda refrigeración externa. Las fresas pueden generar calor; tenga cuidado no tocar la punta inmediatamente después del uso.

TREFINA

Referencia	Producto	Descripción	Precio
9702		Trefina CA para retirar los Capuchones de la prótesis de los sistemas LOCATOR®. Para ser utilizada únicamente en acrílico o PMMA. No incluida en el Kit.	46,00 €

LOCATOR® SCAN BODIES

Optimice la secuencia de su trabajo digital



Optimice su Secuencia de Trabajo Digital con Zest LOCATOR® Scan Bodies

Los Scan Bodies LOCATOR, pueden ayudarle a simplificar sus casos de Sobredentaduras, con un proceso digital.

Se pueden utilizar intraoralmente o en laboratorio, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en el proceso digital al capturar con precisión la ubicación del LOCATOR y el Implante.

Están diseñados con las dimensiones exactas de los Capuchones LOCATOR, lo cual mejora aún más la secuencia de trabajo de las prótesis impresas en 3D.

- Diseñe e imprima en 3D o fabrique prótesis fresadas con los huecos del Capuchón incluyendo el espacio necesario para el Procesado.
- Planifique sus casos de LOCATOR con procedimiento digital.
- Capture con precisión la ubicación del Anclaje.
- Escanee intra-oralmente o en un modelo.
- Fabricados a base de PEEK.
- Se pueden esterilizar y reutilizar.

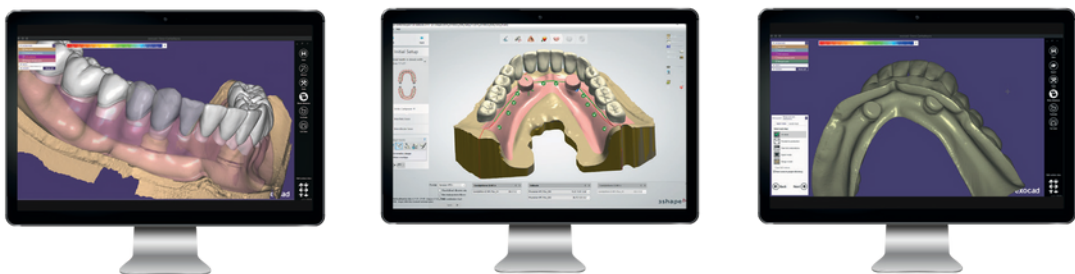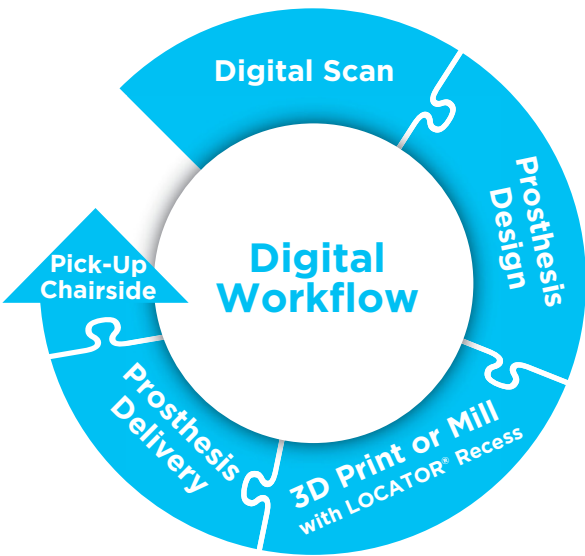

Referencia	Producto	Descripción	Precio
9260-2		LOCATOR®Scan Body (2 Pack)	34,00 €
9260-4		LOCATOR®Scan Body (4 Pack)	61,00 €
9260-10		LOCATOR®Scan Body (10 Pack)	134,00 €

The image features a large, bold, dark teal 'AM' logo centered within a white circle. The background is a solid dark teal color. Behind the white circle, there is a faint, stylized illustration of a hand with fingers slightly curled, rendered in a lighter shade of teal. The overall design is clean and modern.

AM